

BYORK
MEDICAL DIVISION

Хирургический
электрокоагулятор
ZEUS-200



 **ZERONE**
ZERONE CO., LTD.

ZEUS-200 - хирургический электрокоагулятор

УЛУЧШЕННАЯ ВЕРСИЯ



◆ Модернизированная версия обеспечивает безопасность и удобство благодаря мощной и стабильной технологии.

◆ 10 хранилищ доступны при использовании функции хранения пользователя. Доступна функция биполярной резки.

| | |
|-------------------------------|---|
| Основная частота | 400, 500 кГц |
| Источник питания | 120 В или 230 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц |
| Степень защиты | Класс 1, тип CF |
| Габаритные размеры (ШхДхВ мм) | 330х455х150 |
| Вес | 13.0 кг |

Применение

- ◆ Общая хирургия
- ◆ Дерматология
- ◆ Сосудистая хирургия
- ◆ Гинекология
- ◆ Отоларингология
- ◆ Детская хирургия
- ◆ Урология
- ◆ Ортопедия
- ◆ Челюстно-лицевая хирургия
- ◆ Пластическая хирургия
- ◆ Эндоскопия

Выходные данные

| | |
|---------------------------|------------|
| Режим | Zeus-200 |
| Чистый разрез | 200Вт/300Ω |
| Разъем 1 | 150Вт/300Ω |
| Разъем 2 | 120Вт/300Ω |
| Разъем 3 | 100Вт/300Ω |
| Контактная коагуляция | 100Вт/300Ω |
| Распылительная коагуляция | 80Вт/300Ω |
| Биполярная коагуляция | 80Вт/100Ω |
| Биполярный разрез | 80Вт/200Ω |

Особенности

- ◆ Окно дисплея позволяет легко проверить выходное значение, обозначенное цифрами.
- ◆ Устройство обеспечивает различные функции, необходимые для выполнения операций в режиме функционального разреза (чистый разрез, разъем 1, разъем 2, разъем 3), режима коагуляции (распылительная, контактная), режим биполярной коагуляции: ручной или ножной, биполярного разреза (только обновленная версия).
- ◆ Каждое рабочее состояние может быть проверено звуковой и световой индикацией.
- ◆ Ручной биполярный (автобиполярный) можно проверить только с помощью контактных щипцов.
- ◆ Благодаря микропроцессору рабочий процесс стабильный и удобный.
- ◆ Автоматическое определение частоты входной мощности.

Стандартные аксессуары

| Товарный код | Название товара |
|--------------|---|
| FS02-01R | Двойной ножной переключатель |
| FS01-01R | Одиночный ножной переключатель |
| HD02-01D | Одноразовая ручка с двумя кнопками |
| HD01-01R | Монополярная ручка и кабель |
| PL02-04R | Силиконовая пластина для пациентов (240x150 мм) |
| PL03-02D | Одноразовая пластина для пациента (2 шт.) |
| CA02-03R | Рассеивающий электрод пациента |
| CA03-01R | Кабель заземления |

| | |
|----------|--|
| CA01-01R | Биполярный кабель щипцов |
| BF01-01R | Биполярные щипцы (Bayonet 17.8 см 1.0 Tip) |
| EL01-02D | Электрод (Нож 20 мм*70 мм) |
| EL02-02D | Электрод (Шарик 5 мм*50 мм) |
| EL03-02D | Электрод (Петля 6 мм*130 мм) |
| EL04-02D | Электрод (Иголка 20 мм*70 мм) |
| EL04-04D | Электрод (Игла наклонена 20 мм*70 мм) |



FS02-01R



FS01-01R



HD02-01D



HD01-01R



PL02-04R




PL03-02D



CA02-03R



CA03-01R

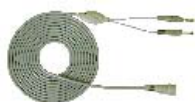

CA01-01R



BF01-01R



EL01-02D/EL02-02D
EL03-02D/EL04-02D/EL04-04D

Функция безопасности

- ◆ Предохранитель, встроенный в силовую печатную плату, защитит ваше оборудование.
- ◆ Когда пластина, прикрепленная к пациенту, отсоединена от аппарата, начинает мигать красный сигнальный индикатор.
- ◆ Если нажать любую кнопку на рукоятке с двумя кнопками или нажать любую педаль на двойном педальном переключателе, раздастся звуковой сигнал.
- ◆ Функция REM (контроль возвратного электрода) контролирует размер площади контакта между пациентом и электродом.
- ◆ Если размер не подходит, он автоматически блокирует высокочастотный ток, чтобы свести к минимуму опасность возгорания.
- ◆ Для защиты пациента корпус полностью заземлен, чтобы ток утечки мог течь в землю.

BYORK

M E D I C A L D I V I S I O N

Комплексная сервисная поддержка



Ответ службы
в течение
24 часов



Богатый резервный
склад запасных
частей и быстрая
доставка



Эффективная
сервисная сеть,
квалифицированные
инженеры

+998 71 208 27 72
www.byork.uz
info@byork.uz

[byorkgroup](#)
[byorkgroup](#)
[byorkgroup](#)

Узбекистан, г. Ташкент Яшнабадский район,
улица Паркент, дом 76, 100007

